

CREST

CHAISE DE BAIN



Le fauteuil de toilette inclinable Crest 3 en 1 favorise une expérience de bain sereine. La sécurité du patient et de l'aidant est primordiale, et son utilisation est simple grâce à un bouton unique.

EQUIPEMENT STANDARD



Le tissu 3D-Spacer à séchage rapide épouse les formes du corps, offrant confort et soutien.

S'incline jusqu'à 45° sur place, éliminant ainsi le besoin de transfert supplémentaire

Mécanisme d'inclinaison manuel facile à utiliser avec système de commande à tige solide sans accrocs nécessitant un entretien minimal.

Sécurité en milieu humide grâce aux roulettes freinées


Cadre principal en acier robuste et très durable

Accoudoirs réglables pour une plus grande facilité d'accès

Coussins latéraux rembourrés en option pour une sécurité accrue

La fixation en tissu à boucle à clic est facilement amovible pour le lavage, améliorant ainsi l'hygiène et la prévention des infections.

FICHE TECHNIQUE CREST

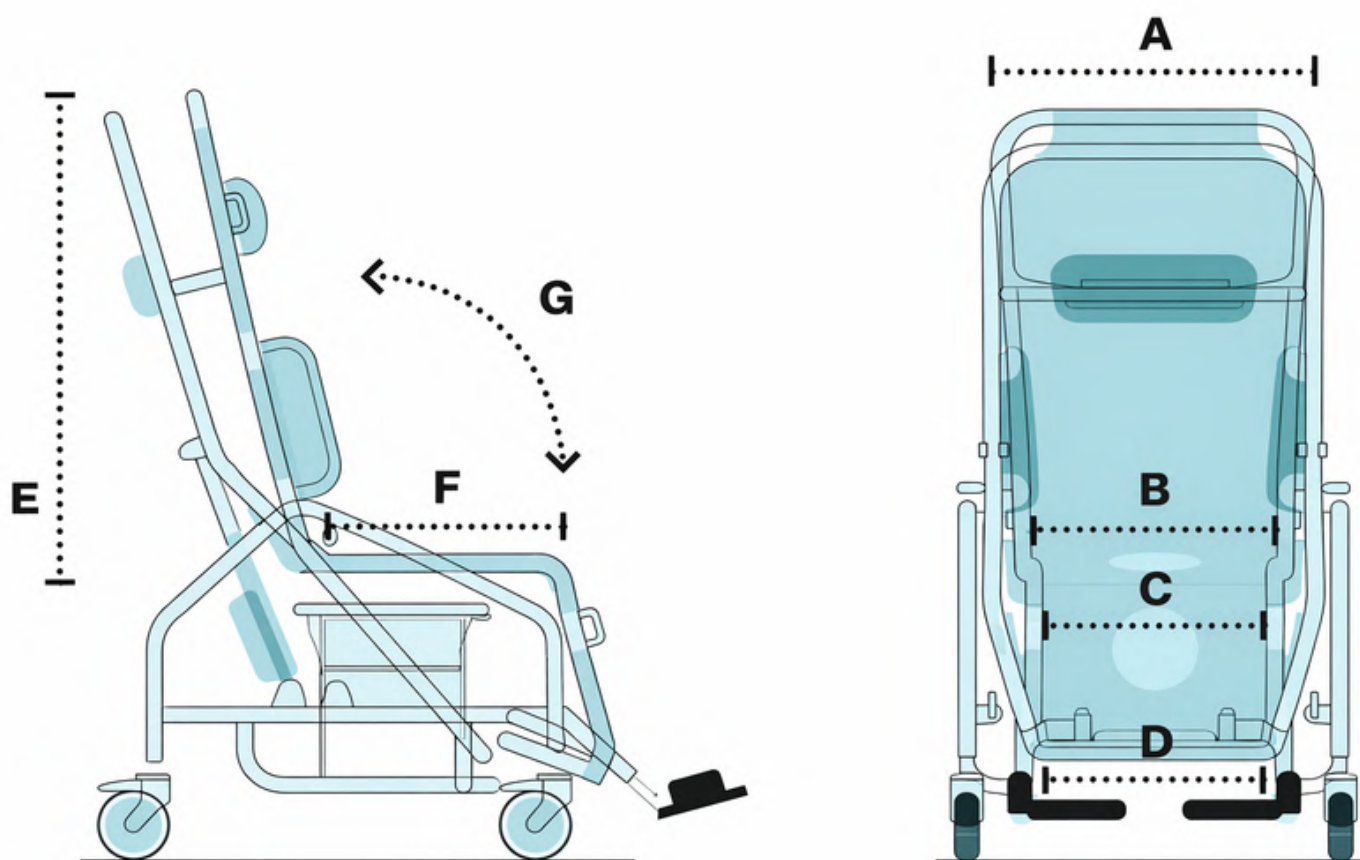

	Small	Médium	Large
A Largeur du haut	440mm	463mm	587mm
B Largeur des hanches	348mm	392mm	472mm
C Largeur des genoux	376mm	378mm	419mm
D Largeur des pieds	329mm	335mm	376mm
E Hauteur du dossier	663mm	693mm	868mm
F Longueur des cuisses	277mm	369mm	483mm
G Angle d'inclinaison	45°	45°	45°

Charge maximum d'utilisation : 175Kg

PRINCIPES D'UN POSITIONNEMENT CLINIQUE EFFICACE



Charger le patient

Assurez-vous que tout le patient est en contact avec la chaise afin de redistribuer la pression exercée sur les zones osseuses.
N'oubliez pas de charger les pieds ! 19 % du poids du corps passe par les pieds.



Assurer un soutien postural

Tenir compte des déviations fixes et corriger les déviations flexibles afin de garantir le confort et le soutien lors des soins d'hygiène et de la douche, et d'éviter une redistribution inégale de la pression.



Repositionnement efficace

Il permet aux soignants d'avoir un meilleur accès pour les soins d'hygiène et la douche, ce qui contribue à offrir un plus grand confort au patient.



Surface appropriée

Matériau ajouré amovible, lavable en machine et doté d'un revêtement antibactérien, facilitant le maintien de la propreté et de l'hygiène par les soignants.
De plus, l'acier inoxydable avec revêtement par poudre garantit durabilité et résistance à la rouille.

ACCESSOIRES



Appuie-tête



Housse de siège



Supports d'accoudoirs



Télécommande



Pommeau Rond