



FAUTEUIL MILANO





MESURE TECHNIQUE

Dimensions de base

A: Hauteur totale	1300 mm
B: Hauteur dossier	770 mm
C: Hauteur assise	540 mm
D: Longueur totale	930 mm

Réglage hauteur d'assise - repose pieds

E: Haut	400 mm depuis l'assise
F: Bas	580 mm depuis l'assise

Profondeur d'assise (L)

Position 1	400 mm
Position 2	450 mm
Position 3	500 mm

Largeur d'assise et dimensions hors tout

G: 400 mm	H: 700 mm
450 mm	750 mm
500 mm	500 mm

Hauteur de dégagement

I	130 mm
---	--------

Angles d'inclinaison

II	Dossier 100°-140° 40°intervalle
----	------------------------------------

III	(Angle du repose-jambes)
-----	--------------------------

Position 1


Position 2 (angle négatif)

VI	TiltinSpace assise
----	--------------------

5°vers l'avant ,35°vers l'arrière

Poids du fauteuil 120 Kg

Poids max de l'utilisateur 159 Kg

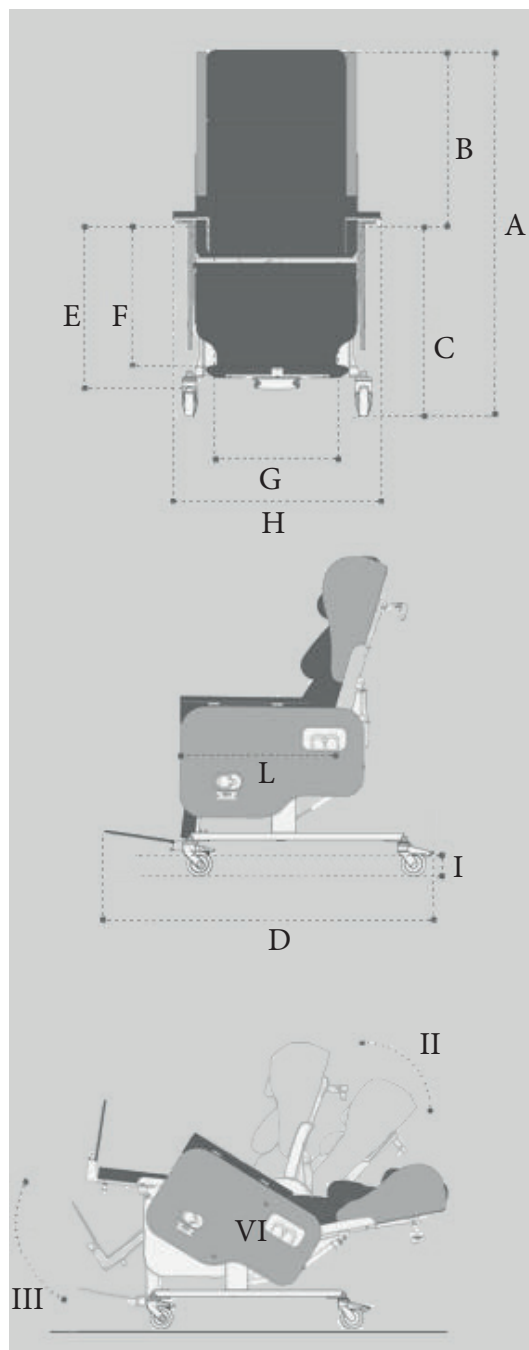



Caractéristiques

Milano est idéale pour les utilisateurs avec une mobilité réduite ou avec un mauvais équilibre en position assise, qui ont besoin de confort et de support sans perte d'indépendance au niveau des fonctions et des transferts.

Profondeur d'assise réglable (40-45-50 cm).

Largeur d'assise réglable (40-45-50 cm).

Existe en trois versions : Manuelle, semi-électrique, électrique avec mémorisation de position.

Dossier en cascade ou contour (option).

Dossier réglable en hauteur.

Inclinaison dans l'espace : une fonction qui permet de basculer le fauteuil en conservant l'angle entre l'assise et le dos.

Inclinaison du dossier.

Repose jambes inclinable.

Milano convient aux maladies suivantes : Paralyse cérébrale - Traumatisme médullaire - Traumatisme crânien - Accident vasculaire cérébral sclérose en plaques - Maladie de Parkinson - Maladie neurodégénérative - Démence - Maladie d'Alzheimer.

Réglage : Milano se règle en moins d'une minute. Pratique pour l'utilisation du fauteuil accueillant plusieurs patients à tour de rôle, dans les maisons de retraite, maisons et foyers médicalisés ou dans les hôpitaux.

Options

Cales tronc - Coussin d'assise - Appui-tête - Appui-tête concave - Tablette - Roues 125 cm.

Normes de sécurité

Le Milano porte le marquage CE selon les directives sur les dispositifs médicaux 93/42/EEC et les normes BS ISO 7176 à risque moyen.

Il est conforme aux exigences de la norme BS EN 12182: 1999.

Garniture

Le tissu et les matériaux des fauteuils sont conformes aux normes non feu.

Garantie

Le Milano a 7 ans de garantie sur le cadre et 1 an de garantie sur le reste des parties.

